

BIOXEL

ESPECIFICAÇÃO

Fonte de laser	
Tipo de Laser	CO ₂ Laser
Comprimento De Onda	10.600nm
Laser Power	1 - 40W
Fonte de alimentação	220-240V~, 50/60 Hz
Sistema de resfriamento	Water Cooling
Dimensões	430(W)x480(D)x1240(H)mm
Peso	47kgs
Display	10.2" Ecrã tátil a cores LCD

Função - Fracional CO₂

Tipo de peça de Mão	50mm, 100mm Hand Piece E.N.T & Peça de Mão Dental (Opcional)
Scan Size	2x2-20x20mm
Formas	Quadrado, Hexágono, Triangular, Circular
Padrão	Array, Grid, Random
Profundidade	1-5 nível
Tempo de repetição	0.5-2.5sec, único
Densidade	1-23 nível

Função - Geral CO₂

Tipo de peça de Mão	Peça de Mão Fracional LVR Peça de Mão (Opcional)
P. Duração	CW : 2-30ms Normal Pulse : 5-20ms Super Pulse : 1,0-4,0ms Ultra Pulse : 90-900µs
Tempo de repetição	off, 2-500ms
Modo De Operação	CW, S. Contínuo, Normal Pulse, Super Pulse, Ultra Pulse



BIOXEL

Sistema Laser CO₂ Fracionado

Ami
AESTHETIC INNOVATION

www.amimed.co.kr

Ami
AESTHETIC INNOVATION



BIOXEL

Introdução

- O Laser Fracionado utiliza um feixe de laser fino para minimizar os danos causados à pele pelo calor e para encurtar o período de recuperação e rejuvenescimento. Portanto, os pacientes podem retomar suas atividades diárias normais, imediatamente após o tratamento.
- O Laser Fracionado utiliza um tubo de CO₂ para melhorar os efeitos do tratamento. Este tubo de CO₂ possui um longo tempo de vida, permitindo a estabilidade de que o tratamento precisa.
- O tempo de tratamento pode ser encurtado, ajustando o tamanho do ponto e a densidade do feixe, o que é benéfico para ambos o operador e o paciente.


Como opera o Laser Fracionado?

Dividindo feixe de laser de modo bem fino (mais fino do que um fio de cabelo), irradia a Epiderme e faz com que muitas pequenas lesões térmicas surjam na estrutura da pele, sem quaisquer danos graves. Por meio desta intervenção, a pele é regenerada de dentro para fora de forma ágil e sem efeitos secundários, ou seja, durante este tempo a pele se rejuvenesce naturalmente.

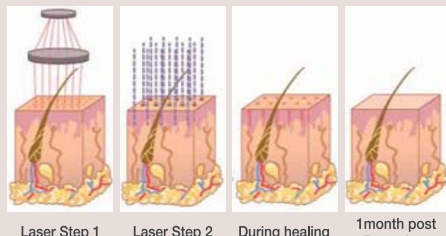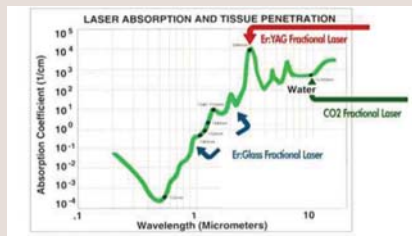


Aplicações

- Estiramento da pele
- cicatrização de acne
- Verrugas/pintas
- Rejuvenescimento da pele
- Pore grande
- Sardas
- Rugas
- Estrias
- RVL(Rejuvenecimiento Vaginal Láser)

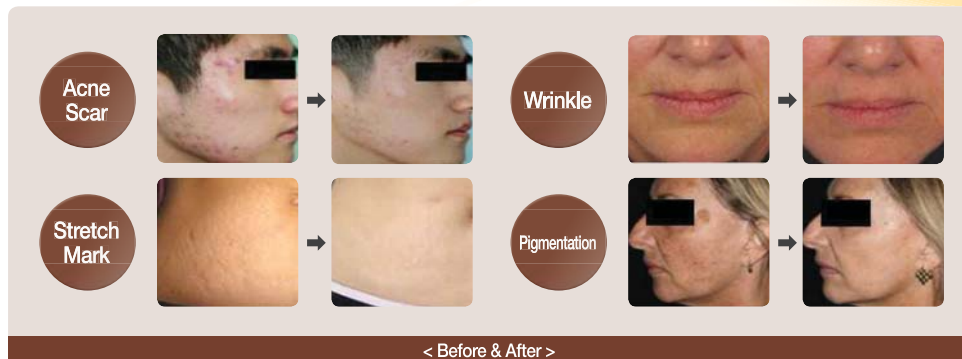

Características

- Fracional & Baixo Dolor fracional & modo g de CO₂
- Dor reduzido & excelente eficácia
- Três Padrões

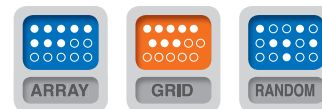

- Inteligente & Various protocolos para a
- Max 4489 pontos para uma área de 20x20mm
- Várias formas de scan



MODO PRINCIPAL

- Modo Geral
- Modo fracional
- Modo Fracional de baixo Dor

Protocolos inteligentes

- Cirurgia Geral
- Cirurgia Dentária
- Laser Fracionado CO₂
- Laser CO₂ Fracionado de baixo dor
- LVR (Rejuvenescimento Vaginal Laser)

