

# HACLRE


## ESPECIFICAÇÃO

Fonte de laser	
Tipo de Laser	Laser de Diodo
Comprimento De Onda	808nm
Energia	1- 60 J/cm <sup>2</sup>
função	
Modo De Operação	Braço, Barba, Peito, Axila, Virilha, Perna
velocidade do ponto	1-15Hz
Largura Do Pulso	7.5-1200ms (600W) 10-2025ms (300W)
Forma do raio	11x15mm
Condução luz	Crystal Coupling
Dica de arrefecimento temperatura	upto -5°C
Características Generales	
Fuente De Alimentación	220-240V~, 50/60Hz
Sistema de Arrefecimento	Water cooling equipped with chiller
Dimensões	380(W) x 540(D) x 1000(H)mm
Peso	80kgs
Display	Ecrã táctil a cores LCD



# HACLRE



Laser de Diodo para Depilação

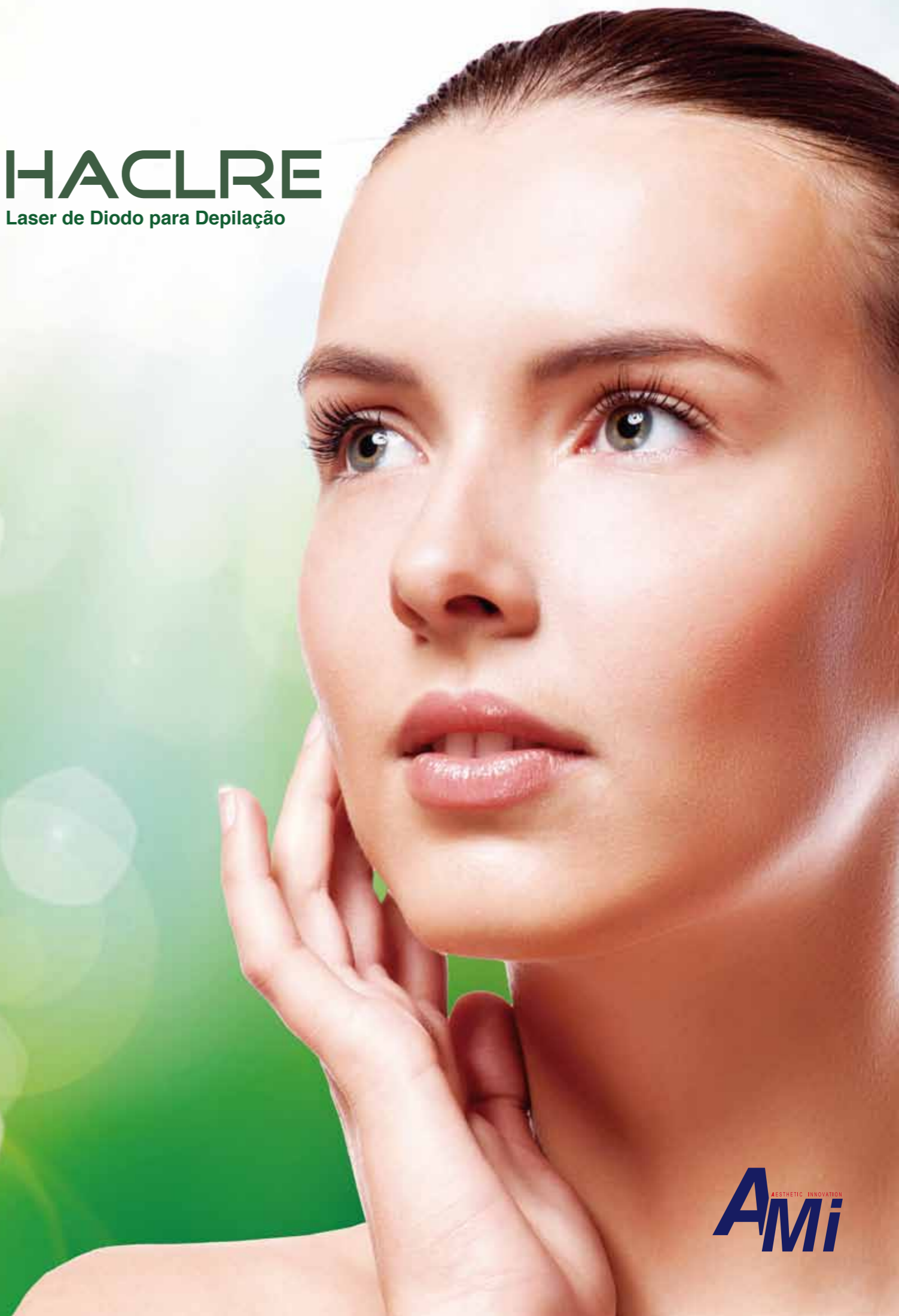

# HACLRE

## Introdução


- Sistema de depilação ( diodo 808nm ) é um dispositivo de terapia de luz não-invasiva especialmente concebido para eliminar os pelos indesejados de todas as partes do corpo. O diodo laser gera uma luz de comprimento de onda de 808nm que tem como alvo o folículo piloso de forma direta.
- A extremidade da peça foi desenvolvida de modo a proteger a camada externa da pele através da diminuição da temperatura da superfície, a fim de evitar danos térmicos a partir de pelo feixe de laser.

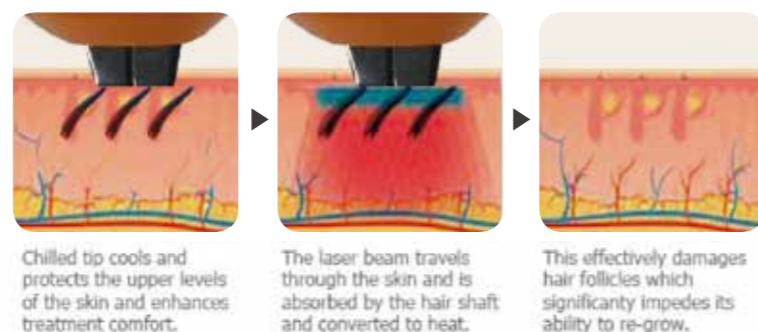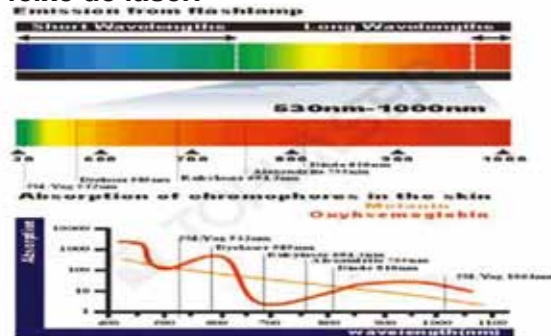

## Características

- O tamanho da ponteira é de 11x15mm, o que oferece alta fluência até 60J / cm<sup>2</sup> com taxa de repetição 15Hz
- O resfriamento da ponteira pode chegar até: -5 °C
- Durabilidade longa com fonte de energia estável
- Curto tempo de tratamento, aplicável para pelos finos e grossos
- O cristais usados para resfriamento fornecem proteção à epiderme sem risco de congelamento e máximo conforto para o paciente durante e após o tratamento
- Tratamento livre de dor e ardência pode ser aplicado: nos braços, barba, seios, axilas, virilha, pernas etc.

## Imagens clínicas (antes e depois)

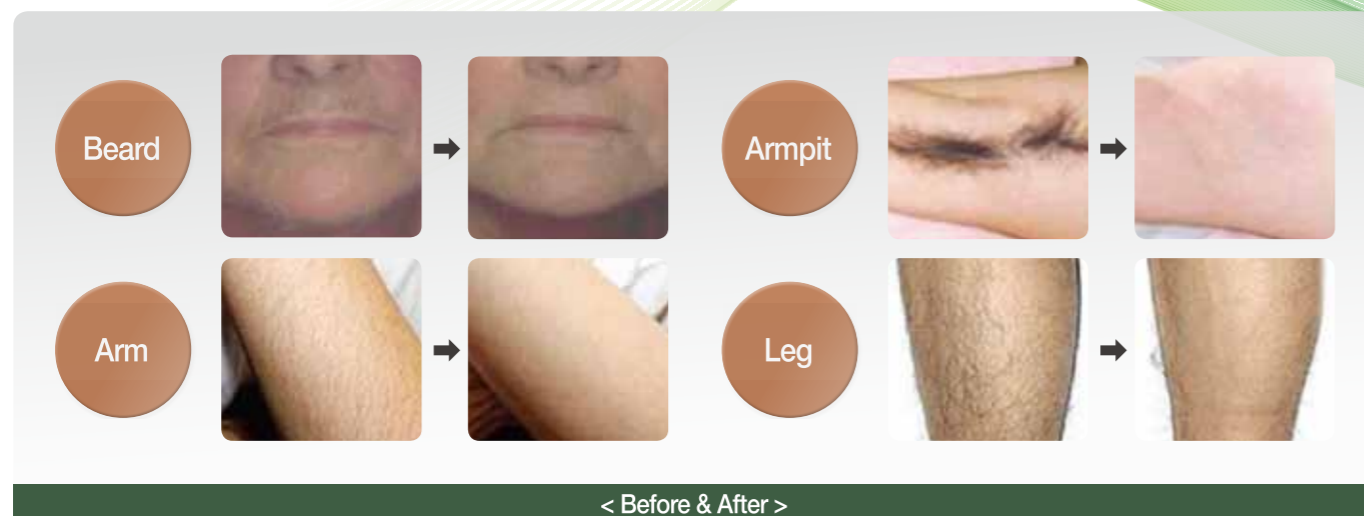

< Before & After >

## Pulso Tipo Triplo

- Disparo de alta velocidade de 15 Hz permite acumular energia no folículo e tratar-lo de forma eficaz e sem dor
- Varios modos de pulso que fornece energia forte e pode reduzir o número de tempo para tratar



## GUI amigável do usuário

- Tratamento de remoção para cada área usa seu próprio parâmetro



- SHR método de tratamento pode ser utilizado para todos os tipos de pele (Energia baixa com alta frequência)
- Diferentes tipos de pulso para cada tipo de pele
- Interface conveniente ajustável em uma única tela

